




## Vitros BuBc a TBIL slide i pro ty nejmenší pacienty

**Jediný test na trhu, který dokáže stanovit různé frakce bilirubinu.**

Měření jednotlivých frakcí sérového bilirubinu může poskytnout zásadní informace, které pomohou lékařům lépe diagnostikovat, léčit a monitorovat určité chorobné stavy.

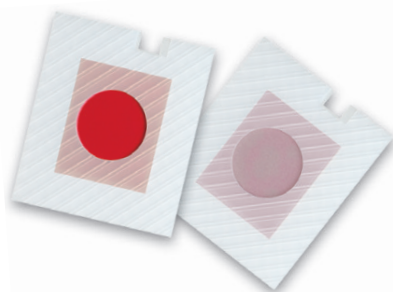

Definice	Nekonjugovaný bilirubin	Konjugovaný bilirubin (mono a dikonjugáty)	Delta bilirubin (kovalentně vázaný na albumin)
Vitros® metoda	Nekonjugovaný (BuBc Vitros slide*)	Konjugovaný (Vitros BuBc slide*)	Delta [TBIL-BuBc]
Tradiční metody (diazotická reakce)	Nepřímý [Výpočet Celkový - Přímý]	Přímý (Diazotická metoda pomocí akcelerátorů, zahrnuje Konjugovaný a Delta)	Nedostupná

\*BuBc- bilirubin unconjugated/bilirubin conjugated; TBIL-total bilirubin